



## ALGENIUX®


Topkwaliteit alginaat met een nieuwe en verfijnde formulering om het hoogste niveau van detailweergave, optimale elasticiteit en scheurweerstand te bereiken bij het nemen van een afdruk. Dankzij de MAP-technologie (verpakking met gemodificeerde atmosfeer) heeft het product een houdbaarheid van 6 jaar. De uitstekende dimensionale stabiliteit maakt het mogelijk om de afdruk na 5 dagen te gieten (indien correct bewaard in een afgesloten container).

**Normale uithardingstijd:**  
3'00" (bij 23°C).

**Snelle uithardingstijd:**  
2'30" (bij 23°C).

**MINT SMAAK |**  
**EINDKLEUR ROZE**

**Verpakkingseenheid**  
A7100 - 1x453g

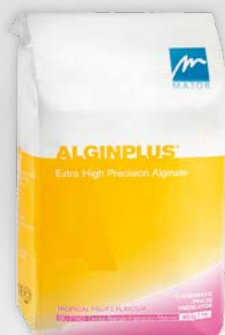

## ALGINPLUS®

Extra-hoogwaardig precisie-alginaat voor afdrukken met een chromatische fase-indicator (kleurveranderend). Nieuwe verrijkte formule voor verbeterde detailweergave. Zeer verfijnde samenstelling. Dankzij de MAP-technologie (verpakking met gemodificeerde atmosfeer) heeft het product een houdbaarheid van 6 jaar. Chromatische aanduiding van de werkfasen voor eenvoudige en precieze resultaten, ongeacht de watertemperatuur en -hardheid.

**Uithardingstijd:**  
2'00" (bij 23°C).

**TROPISCHE FRUITSMAAK |**  
**EINDKLEUR GEEL**

**Verpakkingseenheid**  
A6000 - 1x453g



## ALGINMAX®

Precisie-alginaat voor afdrukken met chromatische fase-indicator (kleurveranderend). Dankzij de MAP-technologie (verpakking met gemodificeerde atmosfeer) heeft het product een houdbaarheid van 6 jaar. Chromatische aanduiding van de werkfasen voor eenvoudige en precieze resultaten, ongeacht de watertemperatuur en -hardheid.

**Uithardingstijd:**  
2'00" (bij 23°C).

**VANILLE-MUNT SMAAK |**  
**EINDKLEUR LICHTBLAUW**

**Verpakkingseenheid**  
A2000 - Vanille-munt 1x453g

# ALGINATEN



## ALGINMAJOR®

Precisie-alginaat voor afdrukken. Dankzij de MAP-technologie (verpakking met gemodificeerde atmosfeer) heeft het product een houdbaarheid van 6 jaar. Stofvrije poeder voor veilig werken en gemakkelijke reiniging.

**Uithardingstijd:**  
2'00" (bij 23°C).

**SINAASAPPELSMAAK |  
EINDKLEUR ORANJE**

**Verpakkingseenheid**  
A1000 - 1x453g



## ALGINKID® ORTHODONTIC

Hoogbestendig alginaat voor orthodontische afdrukken. Dankzij de MAP-technologie (verpakking met gemodificeerde atmosfeer) heeft het product een houdbaarheid van 6 jaar. Snelle uithardingstijd en aangename smaak voor het comfort van jonge patiënten.

**Uithardingstijd:**  
1'50" (bij 23°C).

**SINAASAPPELSMAAK |  
EINDKLEUR GEEL**

**Verpakkingseenheid**  
A3000 - 1x453g

De uitstekende dimensionale stabiliteit maakt het mogelijk om de afdruk na 5 dagen te gieten (indien correct bewaard in een afgesloten container). Major Alginates overtreft de eisen van ISO 21563.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

- ISO 21563
- Houdbaarheid: 6 jaar
- Vijf dagen giettijd (indien correct afgesloten)
- Gestabiliseerde hypoallergene formules

#### EIGENSCHAPPEN

- Zeer verfijnde samenstelling.
- Stofvrij poeder voor veilig werken en eenvoudige reiniging.
- Snelle bevochtigingstijd voor een gladde en plastic consistentie voor eenvoudig mengen.
- Uitstekende compatibiliteit met gips.
- Zeer hoge druksterkte en herstel na vervorming, overtreft de ISO-vereisten.
- Snelle uitharding voor efficiënt werken en comfort van de patiënt.
- Vrij van cadmium en lood. Uitstekende biocompatibiliteit.
- Hoge vloeibaarheid en eenvoudig te mengen.

#### KWALITEITSCERTIFICERING

De kwaliteit van MAJOR tandheelkundige alginaten is getest door het NIOM LABORATORIUM. Deze certificaten geven MAJOR S.p.A. het recht om haar alginaten te markeren met het NIOM-keurmerk van conformiteit, wat de naleving van de kwaliteitsvereisten van het certificeringsprogramma van NIOM en de normen van ISO 21563 garandeert.



## Fysieke eigenschappen

De tijden weergegeven in de tabel zijn verkregen door gedestilleerd water te gebruiken voor het mengen bij 23°C, zoals vereist door de ISO 21563-norm.

|                      | Mengtijd                                                                                   | Bewerkingstijd                                                                               | Uithardingstijd                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALGENIUX FAST</b> | <br>35"   | <br>1'30"   | <br>2'30"   |
| <b>ALGINPLUS</b>     | <br>35"   | <br>1'20"   | <br>2'00"   |
| <b>ALGINMAX</b>      | <br>35"   | <br>1'20"   | <br>2'00"   |
| <b>ALGINMAJOR</b>    | <br>35" | <br>1'20" | <br>2'00" |
| <b>ALGINKID</b>      | <br>30" | <br>1'10" | <br>1'50" |

## ACCESSOIRES



### SPATELS

Nylon spatels voor alginaten | A9020 | 1st.



### KOM

Mengkom voor alginaat | A9050 | 1 st.



we keep you smiling  
**dental tecno benelux**